



Die Sauerstoffversorgung für unterwegs

- Leichter, tragbarer Sauerstoff-Konzentrator ermöglicht Ihren Kunden aktive Tagesgestaltung und Reisen
- Einzigartiges Akku-Design: Akkuwechsel bei laufendem Betrieb möglich für eine durchgehende Nutzung, Akku von oben einsetzbar für einfachsten Zugang, integrierte Akkuanzeige
- 3 in 1 Tragetasche: verwendbar als Henkeltasche, Schultertasche oder Rucksack; alltagstauglich gestaltet mit verstärkten Kanten und Schaumstoffpolsterung
- Sensi-Puls Technologie erlaubt durch das konstante Minutenvolumen eine berechenbare Voraussage der Akkuleistung
- Kompakt und mit einem Gewicht von 2,2 kg leicht zu tragen
- Reichweite bis zu 10 Stunden bei Verwendung von zwei Akkus

Merkmale und Optionen



Einfache Bedienung

Große, verständliche Piktogramme, leichtgängige Druckschalter und beleuchtetes Display.



Einzigartiges Akku-Design

Einfacher Zugang von oben, ohne die Tasche aufzumachen, Akkuwechsel bei laufendem Betrieb, integrierte Akkuanzeige.




3 in 1 Tragetasche

Verwendbar als Henkeltasche, Schultertasche oder Rucksack; alltagstauglich gestaltet mit verstärkten Kanten und Schaumstoffpolsterung.



Schnelle Reinigung bei Patientenwechsel

Einfach zugänglicher Auslassfilter.

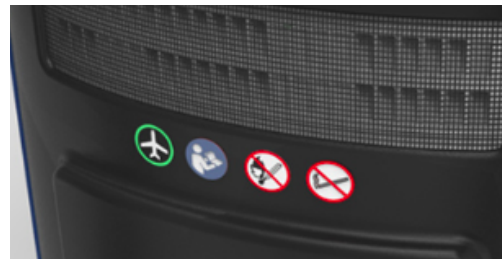

Einfache Wartung

Durch modulares Design kann das Innenleben ohne Werkzeug getauscht werden.



FAA-Zulassung

Flugtransporttauglich.

Zubehör



3 in 1 Tragetasche

Art.-Nr.: POC1-150



Zusatzakku

Art.-Nr.: POC1-110-DE



Netzteil 100-240 V (AC)

Art.-Nr.: POC1-130-EU



Autoadapter 12 V (DC)

Art.-Nr.: POC1-140










Externe Ladestation

Art.-Nr.: POC1-115-DE

Akku separat erhältlich

Technische Daten

	Geräuschpegel	Gewicht	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Pulsmenge	Sauerstoffreinheit
							
Platinum™ Mobile	≤ 40 db(A) bei Einstellung 2	2,22 kg Konzentrator 0,45 kg Zusatzakku	239 mm	188 mm	94 mm	Einstellungen 1-4 Bis zu 880 ml pro Minute	87% - 96%

Bestellnummer: POC1-100B-DE

Lieferumfang

Art.-Nr.: POC1-100B-DE

- Platinum Mobile tragbarer Sauerstoffkonzentrator
- Ausgeklügelte 3 in 1 Tragetasche
- 2 Trageriemen
- 1 Lithium-Ionen-Akku
- AC 100-240V Netzteil
- DC 12V Autoadapter
- 1200 mm Kanüle
- Bedienungsanleitung



Sensi-Puls Sauerstoffabgabe

Erklärung Sensi-Puls siehe Konzentratoren-Übersicht S. 207

Einstellung	P1	P2	P3	P4
Durchschnittliche Pulsmenge bei 20 bpm ¹	11 ml	22 ml	33 ml	44 ml
Minutenvolumen (ml)	220 ml	440 ml	660 ml	880 ml
Reichweite mit einem Akku (Std.:Min.)	05:05	03:30	02:20	01:45
Reichweite mit zwei Akkus (Std.:Min.)	10:10	07:00	04:40	03:30
Ladezeit für einen Akku / zwei Akkus (Std.:Min.)	02:20 / 04:40			

1. bpm (breaths per minute) = Atemzüge pro Minute.