



### Hybrid-System für Wechseldruck- und Weichlagerung

- Druckentlastendes Weichlagerungssystem mit integrierter Wechseldruckfunktion
- Hybrid-System: kann wahlweise ohne Steuergerät als non-energetisches Weichlagerungssystem oder mit Steuergerät als Wechseldrucksystem genutzt werden
- Der Patient kann beim Wechsel zwischen Weichlagerung und Wechseldruck auf der Matratze liegen bleiben
- Druckentlastende Wirkung der Matratze auch bei Patiententransport und Stromausfall
- Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium IV


### Merkmale und Optionen



Bei Benutzung ohne Steuergerät kann der Schlauchkonnektor am Fußende der Active 2 Matratze fixiert werden.



Einfacher Anschluß an das Steuergerät und gleichzeitig CPR-Funktion.

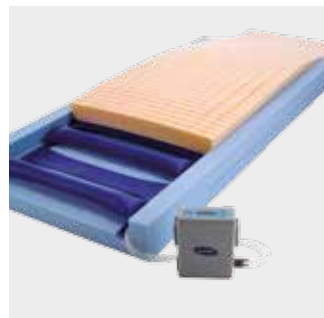

Modularer Aufbau: Zweilagiger Schaumstoff, Wechseldruckzellen-einlage, Steuergerät.



Schonende Wechseldrucktherapie ohne schmerzende Druckspitzen. Damit auch für die Anwendung bei schmerzempfindlichen Patienten geeignet.

### Technische Daten

Invacare® <b>Softform Premier Active 2</b>	Bestellnummern
Hybrid System: Matratze 900 x 2000 mm mit Wechseldrucksystem und Steuergerät	1556629
Hilfsmittelverzeichnisnummer	11.29.09.7002

Matratze	
Gewicht	14 kg
Benutzergewicht max.	247 kg
Waschtemperatur Bezug	80°
Farbe Bezug	Dunkelblau

Steuergerät	
Betriebsgeräusch	≤ 28 dB
Zyklusdauer	10 Minuten

Prüfmethode nach Nr. 11-2 03/2004 MDS-Hi und nach 11-4 03/2004 MDS-Hi

#### Raumgewicht:

Schaumstoff Creme	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>
Schaumstoff Blau	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>

#### Stauchhärte:

Schaumstoff Creme	3,9 kPa
Schaumstoff Blau	6,3 kPa

#### Sondermaße:

(in allen Kombinationen erhältlich)

Breite (mm): 830, 855, 880, 900.

Länge (mm): 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2100.