

Dolomite® Brass



Der leichte Rollator für jeden Tag

KOMPAKT | WENDIG | ANPASSBAR




Dürfen wir vorstellen: Der Rollator **Dolomite Brass**, so **leicht und wendig**, dass er bald Ihr Lieblingsbegleiter für Zuhause wird. Mit seinem Aluminiumrahmen verleiht er Ihnen die **Stabilität**, die Sie im Alltag brauchen. Er ist besonders wendig und lässt sich mühelos über verschiedene Oberflächen rollen – ob im Innen- oder Außenbereich. Der Rollator Dolomite Brass stützt Sie nicht nur beim Gehen, sondern bietet außerdem einen **gepolsterten, stabilen Sitz** für die Verschnaufpause. Wenn Sie den Rollator einmal nicht brauchen, klappen Sie das Sitzbrett einfach hoch und den Rollator zusammen – schon lässt er sich **platzsparend verstauen**.

Praktisch für unterwegs

Den **Dolomite Brass** packen Sie einfach mit ein, so haben Sie ihn immer dabei wenn Sie ihn brauchen. Mit seinem geringen **Gewicht von nur 7 kg** lässt er sich auch problemlos im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitführen. Der Dolomite Brass verfügt über eine **pannensichere Bereifung**, sodass Sie sowohl im Innen- wie im Außenbereich sicher unterwegs sind.

Für alle(s) zu haben

Dieser Rollator lässt sich vielfältig einsetzen und begeistert viele Nutzer. Trotz seines leichten Gewichts ist er bis zu **135 kg** belastbar. Seine Griffe sind **höhenverstellbar** und können ganz leicht an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden.

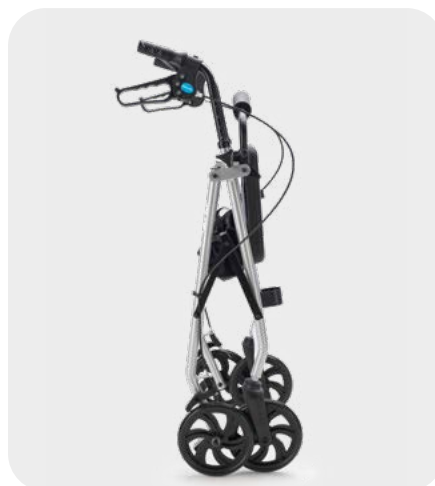

Ausstattung



Gehstockhalter

Ermöglicht ein leichtes und sicheres Erreichen des Gehstocks



Tasche

Hier ist Platz für all die Dinge, die Sie dabei haben möchten.



Stufenhilfe

Erleichtert das Überwinden von Bordstein-kanten oder ähnlich hohen Hindernissen



Gepolsterte Rückenlehne

Zum Anlehnen beim Hinsetzen und Ausruhen

NEU

**BESONDERE
VORTEILE**

8 Anatomische Handgriffe

- ▶ Die Griffe ermöglichen eine ergonomische Handhaltung und fühlen sich angenehm an.

7 Höhenverstellbare Handgriffe

- ▶ Je nach Körpergröße lassen sich die Handgriffe in 8 Stufen mit jeweils 25 mm Abstand einstellen.

6 Reflektorstreifen

- ▶ Die Streifen am Rahmen bieten mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

5 Seilzugbremsen

- ▶ Die Bremsen wirken über den Seilzug direkt am Rad. Für Einstellarbeiten sind sie sehr gut zugänglich.

1

Intuitives Bremsen

- ▶ Die Bremse lässt sich sehr leicht betätigen.
- ▶ Nach unten gedrückt rastet sie ein und bleibt arretiert.

2

Leichter Aluminiumrahmen

- ▶ Mit nur 7 kg mühelos zusammenklappbar
- ▶ Kompakt für die Reise oder Aufbewahrung

3

Gepolsterter Sitz

- ▶ Ideal zum Hinsetzen und Ausruhen für zwischendurch
- ▶ Einfach die Sitzfläche hochklappen, und schon gelangen Sie an die Tasche.

4

Pannensichere Bereifung

- ▶ Die pannensicheren Reifen halten auch hoher Belastung sicher stand.



Immer dabei - schnell verstaut

- ▶ Der Rollator **Dolomite Brass** ist so leicht, dass er Sie überall begleiten kann. Mit einem Griff lässt er sich zusammenklappen und ins Auto verladen oder platzsparend verstauen.



Technische Daten ▼

Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de

Abstand zwischen den Rädern (außen)	Abstand zwischen den Rädern (innen)	Tiefe ▼	Breite gefaltet ▼	Gesamthöhe ▼	Sitzhöhe ▼	Abstand zwischen den Handgriffen ▼	
Dolomite Brass	640 mm	580 mm	620 mm	195 mm	815 - 995 mm	566 mm	486 mm
Rad-durchmesser ▼	Gewicht ▼	Belastbarkeit ▼	Belastbarkeit Tasche ▼	Durchmesser Rahmenrohr ▼	Wendekreis ▼		
Dolomite Brass	191 mm	7 kg*	135 kg	7 kg	Ø33×18 x 1,2	817 mm	

*Gewicht exkl. Zubehör

Produktfarbe ▼



Silber
RAL: 5022

Bitte beachten Sie: die Originalfarben können leicht von der Abbildung abweichen.

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee / Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil / Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

