

Produktkatalog

Balder E-Rollstühle

Österreich 2026



balder

Handmade in Norway



Yes, you can.®

Balder Handmade in Norway



Balder ist eine Marke für innovative Elektro-Rollstühle aus Norwegen, die durch besondere Flexibilität und Funktionalität für den Innenbereich und Außenbereich begeistern.



Sie sind in drei Grundmodellen erhältlich.

Der **Balder Liberty** für Erwachsene, der **Balder Junior** für Kinder und der **Balder Finesse**, der auch mit Stehfunktion erhältlich ist.

Die Rollstühle werden in Hønefoss, Norwegen konzipiert, konstruiert und gebaut.

Da die Produkte der Fa. Balder eine hervorragende Ergänzung zu unserem Invacare Portfolio bieten, freuen wir uns sehr, ab Jänner 2026 die Balder-Vertretung in Österreich exklusiv übernehmen zu dürfen.

Ein Elektrorollstuhl muss so individuell sein, wie der Mensch darin!

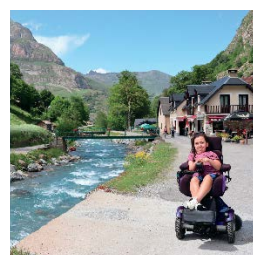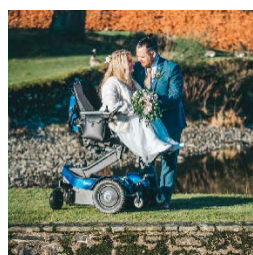

Handgefertigt in Norwegen - von uns!

Die Elektrorollstühle von Balder werden von unserem engagierten und hochqualifizierten Team in Honefoss, Norwegen, in Handarbeit hergestellt, bevor sie an Kunden in aller Welt ausgeliefert werden. Ihr zeitloses, zuverlässiges und robustes Design ist in der ganzen Welt bekannt und wird seit über 30 Jahren entwickelt und produziert.



„Für mich ist es wunderschön und ein echter persönlicher Mehrwert, Balder in Österreich verkaufen zu dürfen.“



Qualität & Dienstleistung

Balder Elektrorollstühle sind für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt - einige über 20 Jahre alte Stühle sind heute noch im Einsatz!

Auch sehr spezielle Anfertigungen und Änderungen sind über den hervorragenden Sonderbau von Balder schnell und korrekt zu schaffen!

Für uns als Invacare Österreich sind die Produkte von Balder eine perfekte Erweiterung unseres E-Rollstuhl Portfolio. Es freut uns sehr als Generalimporteur so tolle Produkte nach Österreich bringen zu können.

Schulungen, Demo-Vorführungen und auch die Begleitung bei Anpassungen werden durch Gernot Gruber und dem kompetenten Außendienstteam von Invacare Österreich durchgeführt werden.

Gernot Gruber

Orthopädietechnik Meister

Power Specialist & Trainings Invacare AT & Central Europe

FINESSE F390

Der F390 hebt sich von allen anderen Elektrorollstühlen ab und bringt Sie mit einer von Ihnen gesteuerten Stopp/Start- Bewegung vom Sitzen oder Liegen in eine aufrechte Position. Mit einem stützenden Brustgurt und einer Kniestütze für absolute Sicherheit und Komfort können Sie sogar sicher im Stehen fahren und darauf vertrauen, dass Sie stabil bleiben.

Wenn der F390 beginnt, sich in eine stehende Position zu bewegen, schalten sich die Stützrollen automatisch ab, wenn der Untergrund eben ist. Wenn die Oberfläche uneben ist, fährt der F390 nicht weiter, so dass Sie nur dann stehen, wenn es sicher ist, dies zu tun.

In der Sitzposition fährt der F390 auf Knopfdruck in eine vorprogrammierte Position Ihrer Wahl zurück.

Der F390 ermöglicht Ihnen nicht nur das Stehen, sondern verfügt auch über die gleichen elektrischen Sitzfunktionen und den gleichen Komfort wie unser F380, der Ihnen eine größere Auswahl an Positionen bietet, die Ihnen den Alltag erleichtern.

Nach Ihrer persönlichen Beurteilung werden Sie feststellen, wie anpassungsfähig Balder Elektrorollstühle wirklich sind. Sie können den F390 nicht nur nach Ihren individuellen Wünschen gestalten lassen, sondern auch aus einer Reihe von Farben, Sitzstoffen und Zubehörteilen wählen, um einen Balder zu kreieren, der ganz auf Sie zugeschnitten ist.



- Auswahl an Eigenbesteuerung
- Spezialisierte Sitzgelegenheiten
- Hochklappbare Armlehnen
- Pannensichere Reifen
- bis zu 40 km Reichweite
- langlebiger Teilebestand
- unerreichte Langlebigkeit
- Kinn-/Kopfkontrolle





FINESSE F380

Dieser Elektrorollstuhl ist eines unserer beliebtesten Modelle, das mit unzähligen maßgeschneiderten Optionen ausgestattet ist, die es uns ermöglichen, ihn genau nach Ihren Bedürfnissen zu bauen. Der F380 hat einen so großen Bewegungsspielraum, dass bequemes Sitzen an einem Tisch oder Schreibtisch, hohe und niedrige Reichweite oder bequemes Entspannen nicht länger ein Wunsch bleiben, sondern alltägliche Realität werden.

Wenn Sie in einem Finesse sitzen, werden Sie als Erstes bemerken, wie bemerkenswert bequem er dank des ergonomischen Designs des Sitzes und der hochwertigen Polsterung ist. In Kombination mit dem vollständig verstellbaren Sitz, der Rückenlehne, den Fußstützen und den Beinstützen erhalten Sie einen Stuhl, der alles tut, um die Reibung zu verringern und den Druck zu mindern. Der Stuhl kann optional mit 5 elektrischen Sitzfunktionen ausgestattet werden, darunter eine beeindruckende „Tilt-in- Space“-Bewegung, die es Ihnen ermöglicht, sich um bis zu 45° nach hinten und 15° nach vorne zu neigen, während Sie in der gleichen Sitzposition bleiben. Darüber hinaus ist er einer der vielseitigsten Elektrorollstühle auf dem Markt, da er sich komplett flach hinlegen lässt und die Sitzhöhe variabel eingestellt werden kann.

MEHR ERREICHEN DURCH FINESSE



JUNIOR J335

Die Kinderjahre sind so wichtig - eine Zeit, in der Ihr Kind beginnt, eigene Entscheidungen zu treffen und zu entdecken, wer es wirklich ist. Der Balder Junior 335 ist ein Elektrorollstuhl, der mit Ihrem Kind mitwächst und ihm mehr Unabhängigkeit und Selbstvertrauen gibt wenn es sich neuen Herausforderungen stellt.

Der J335 bietet alle Vorteile unserer Erwachsenenstühle und ermöglicht es Ihrem Kind, sowohl drinnen als auch draußen mehr zu erleben.

Was unseren Junior-Stuhl so besonders macht, sind die verschiedenen Positionen, die er einnehmen kann. Im J335 kann Ihr Kind bis zu einer Höhe von 0,8 m oder bis zu 0,35 m über dem Boden sitzen. Außerdem kann es flach liegen, um bis zu 45° nach hinten und um 15° nach vorne gekippt werden, wodurch viele weitere Aktivitäten möglich sind.

Sitz, Rückenlehne, Fußstützen und Bein-
stützen des J335 sind unabhängig vonein-
ander einstellbar, so dass Sie es Ihrem Kind
in jeder Position so bequem wie möglich
machen können.



Unsere Juniorstühle sind langlebig und wachsen mit.



JUNIOR J340

Vom Spaß im Park bis zum Ausflug in den Zoo - das Leben eines Kindes besteht aus neuen und anregenden Erfahrungen. Die Möglichkeit, fröhlich zu spielen und die Gesellschaft anderer Kinder zu genießen, ist unglaublich wichtig. Dies hat Baldertech dazu inspiriert, einen ganz besonderen Elektrorollstuhl zu entwickeln - den Balder Junior 340.

Der J340 ist dem Balder J335 sehr ähnlich, jedoch mit der zusätzlichen Funktion, dass Sie stehen können. Wenn der J340 beginnt, sich in eine aufrechte Position zu begeben, senken sich die Stützrollen automatisch ab, wenn die Oberfläche eben ist, so dass sich Ihr Kind im Stehen sicher bewegen kann.

Der J340 Junior hebt und senkt sich auch, wenn Ihr Kind sitzt oder liegt, so dass es höher hinaus oder näher an den Boden heranreichen kann.

Außerdem lässt er sich nach vorne und hinten in Positionen neigen, die das Spielen, Entspannen und Arbeiten angenehmer machen.



LIBERTY L380

Erleben Sie etwas anderes mit dem Balder Liberty 380. Handgefertigt nach den hohen Standards, die Sie von Baldertech erwarten, erfüllt der Liberty die Bedürfnisse von Menschen, die den Unterschied eines Elektrorollstuhls mit Hinterradantrieb bevorzugen.

Unter Verwendung der gleichen hochwertigen Komponenten wie unsere Balder Finesse Elektrorollstühle wurde der Liberty mit einem Hinterradantrieb ausgestattet. Der Liberty ist sowohl als Erwachsenen- als auch als Junior-Rollstuhl (J335) erhältlich. Er ist ein äußerst anpassungsfähiger Elektrorollstuhl mit zahllosen Optionen, die es uns ermöglichen, einen vollständig auf Sie zugeschnittenen Rollstuhl zu bauen.



Über seinem Fahrgestell verfügt der L380 über die gleichen Sitzfunktionen wie der Rest der Balder-Stuhlreihe und umfasst standardmäßig 5 elektrische Sitzfunktionen, darunter die Kippbewegung im Raum, das Flachlegen und die variable Sitzhöhe.

Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 40 km sind Sie mit dem Liberty den ganzen Tag unterwegs. Wie bei jedem Elektrorollstuhl von Balder können Sie Ihren Liberty mit einer Auswahl an Sitzsystemen und Stoffen, einschließlich der Farbe des Fahrgestellbezugs, individuell gestalten. Wir haben auch eine große Auswahl an Zubehör, darunter leistungsstarke LED-Leuchten für zusätzliche Sicherheit im Dunkeln und praktische Taschenhaken für das Tragen eines Rucksacks. Während Ihrer persönlichen Bewertung des Balder Liberty gehen wir mit Ihnen alle Optionen durch und stellen sicher, dass er der richtige Stuhl für Sie ist.

BELIEBTE ZUBEHÖRTEILE:



Verschiedene Optionen für Autohalterungen



Leistungsstarke LED-Lichter, wahlweise mit Blinker




Verschiedene Steuerungen für Begleitpersonen




Viele Varianten von Reifen




Touch-Screen

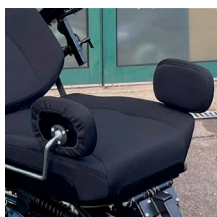

Seitenstützen und Gurte

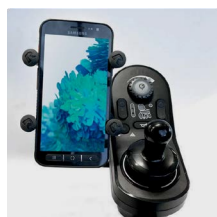

Mobile-/Tablet-Halterungen

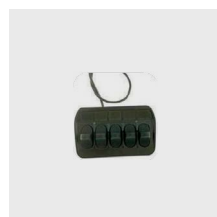

Individuelle Lösungen durch Buttons, Schalttafeln und Memoryfunktionen



Technische Daten:

Positionsnummer	J335	J340	F380	F390	L380
Breite	64 cm	64 cm	64 cm	64 cm	65 cm
Länge ohne Fußstütze	81 cm	81 cm	81 cm	81 cm	81 cm
Länge mit ausgeklappter Fußstütze	97 cm	97 cm	103 cm	103 cm	103 cm
Sitzbreite	27,5-35 cm	27,5-35 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm
Sitztiefe	32,5-40 cm	32,5-40 cm	40-52,5 cm	40-52,5 cm	40-52,5 cm
Sitzhöhe ab/Sitzpolster	35-80 cm	35-80 cm	35-80 cm	35-80 cm	35-80 cm
Höhe der Rückenlehne	38-42 cm	38-42 cm	44-62 cm	44-62 cm	44-62 cm
Höhe unter dem Fahrgestell	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	8,5 cm
Abstand der Achsen	61,5 cm	61,5 cm	61,5 cm	61,5 cm	52 cm
Gewicht	127 kg	133 kg	134 kg	142 kg	134 kg
Max. Benutzergewicht	75 kg	75 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Winkel der Rückenlehne	0° to 90°	0° to 90°	0° to 90°	0° to 90°	0° to 90°
Kippen	-15° to 45°	-15° to 25°	-15° to 45°	-15° to 25°	-15° to 45°
Winkel der Fußstütze	0° to 90°	5° to 90°	0° to 90°	5° to 90°	5° to 90°
Maximale Hindernishöhe	60mm	60mm	60mm	60mm	60mm
Maximale Geschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Maximale Neigung	6°	6°	6°	6°	6°
Min. Bremsweg	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m	2.69m
Maximale Reichweite	40 km	40 km	40 km	40 km	40 km
Vorderräder, Abmessungen	3 x 8"	3 x 8"	3 x 8"	3 x 8"	2.8/2.5 x 4"
Hinterräder, Abmessungen	2.5 x 3"	2.5 x 3"	2.5 x 3"	2.5 x 3"	3.5 x 8"
Vorderräder, Luftdruck	30 psi	Pannensicher	30 psi	Pannensicher	30 psi
Hinterräder, Luftdruck	50 psi	Pannensicher	50 psi	Pannensicher	40 psi
Wendebreite (Drehpunktweite)	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Klasse	B	B	B	B	B
Batterien	55/62Ah 12V	55/62Ah 12V	55/62Ah 12V	55/62Ah 12V	55/62Ah 12V
Gewicht der Batterien	19 kg x 2	19 kg x 2	19 kg x 2	19 kg x 2	19 kg x 2

Geprüft nach den folgenden Normen:

EN 12184	Und die zugrundeliegenden Normen.
ISO 1021 1/2	Alle Stoffe sind schwer entflammbar.

Yes, you can.

Kontaktieren Sie uns:

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee

Telefon +43 6232 553-50
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Crash getestet

Wir haben auch eine perfekte Lösung für das Reisen in einem Fahrzeug entwickelt - das crash-getestete Balder Automatic Tie-down System. Dieses für Finesse- und Liberty-Rollstühle einzigartige System nutzt die Kraft des Rollstuhls, um einen Sicherungsmechanismus zu betätigen, der den Rollstuhl an einem Ankerpunkt auf dem Fahrzeugboden verriegelt.

Für die E-Rollstühle von Balder wurden neben unserem Eigenen Docking-System auch für die Verwendung mit dem QLK-System von Qstraint und der DAHL Docking – Station Crashgetestet.

