

Birdie[®]EVO

Mobile Patientenlifter



Invacare Patientenlifter
mit Komfort-Effekt und Design-Anspruch



Yes, you can.

Die EVOLution des mobilen Patientenlifters

Die Lifter-Familie *Invacare Birdie^{EVO}* zeichnet sich durch eine Fülle an durchdachten Funktionen für den sicheren und komfortablen Transfer aus – zwischen Bett, Stuhl und sogar für die Aufnahme vom Boden. Dabei kann der Patient einfach um 360° gedreht werden. Das moderne, ansprechende Design ist auf Ergonomie und Sicherheit bei der Bedienung ausgerichtet.

„Sehr gut“ im unabhängigen Test

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) bestätigt in einem unabhängig durchgeführten Liftertest mit Pflegekräften: In allen drei Haupt-Testkriterien Handhabung, Kraftaufwand und Anwenderakzeptanz schneidet der *Birdie^{EVO}* Lifter mit „SEHR GUT“ ab.

Ein besonders gutes Urteil und die Note „sehr gut“ gaben die Testpersonen den Liftern (...) und Invacare Birdie EVO.*

Absoluter Preis-Leistungs-Sieger

Der zweite „sehr gute“ Lifter, Invacare Birdie EVO, ist 840 Euro preiswerter und bereits für 1.650 Euro erhältlich.*

*Den kompletten Test der BGW finden Sie auf: www.bgw-online.de/test



BGW-TEST
SEHR GUT
(1,4)



Einfache Bedienung, schneller Transport und praktische Aufbewahrung

Alle Modelle der *Birdie^{EVO}-Familie* lassen sich komplett werkzeuglos auf- und zusammenklappen sowie praktisch hochkant lagern und sind daher besonders platzsparend. Falls nötig, sind sie ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar.

Der *Birdie^{EVO} COMPACT* ist mit 31 kg Gesamtgewicht besonders leicht und daher noch einfacher zu transportieren und aufzubewahren.





Slow'R®

- ▶ Der integrierte Dämpfer reduziert Bewegungen des Patienten auf ein Minimum.



SMARTLOCK®

- ▶ Schneller und einfacher Austausch zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug.



Innovatives Haken-Design



- ▶ Die neu designten Haken ermöglichen eine einhändige Gurtbefestigung. Das höchst stabile, gummierte Material reduziert die Verletzungsgefahr.

Weitere Vorteile



- ▶ Durch die ergonomischen Griffe lässt sich der Birdie EVO besonders einfach manövrieren.



- ▶ Durch die geschwungene Form von Ausleger und Spreizbügel haben Patient und Pflegekraft ein freies Sichtfeld und können jederzeit Blickkontakt halten.



- ▶ Das ergonomisch gebogene Design verleiht ein sicheres, geborgenes Gefühl. Der Lifter lässt sich spielend leicht und noch näher an Bett, Sessel oder Elektro-Rollstühle heranfahren.

BGWtest

**FÜR SIE
GEPRÜFT**

8/2019

Vergleichender Produkttest der BGW für Gesundheitseinrichtungen*

		Invacare Birdie EVO	Ihre Vorteile
Handhabungstests	45 %	▶ sehr gut (1,4)	▶ Sehr gut in der Handhabung
Kraftmessungen	10 %	▶ sehr gut (0,7)	▶ Bestnote für die Rückenschonung : Geringster Einsatz eigener Körperkraft beim Transfer
Anwenderakzeptanz	45 %	▶ sehr gut (1,5)	▶ Einfache, sichere Anwendung und hohe Praxistauglichkeit
BGW-Gesamturteil	100 %	▶ SEHR GUT (1,4)	

*Den kompletten Test der BGW finden Sie auf: www.bgw-online.de/test

Die Innovationen auf einen Blick

Vom Ausleger, zum Spreizbügel, zum Patientengurt...



◀ **Slow'R®** PATENTIERT Das Dämpfungssystem reduziert Bewegungen des Spreizbügels

Das innovative entwickelte Dämpfungssystem Slow'R ist im Lifterarm **unsichtbar integriert**. Es sorgt dafür, dass der Patient auch bei zügigen Bewegungen **sehr ruhig** im Lifter hängt.



◀ **SMARTLOCK®** PATENTIERT Einfach, schnell und sicher auszuwechseln

Der innovativ entwickelte und patentierte Mechanismus ermöglicht ein schnelles und sicheres Wechseln zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug. Ebenso ist unsere medizinische Waage RS300 in Sekundenschnelle werkzeuglos eingehängt. Seitliche Bewegungen werden durch die Konstruktion **effektiv reduziert**.



◀ **Innovatives Haken-Design** Patientengurte einfach anbringen

Das ergonomische Design der Haken ermöglicht das **einhändige Anbringen** des Patientengurtes. Durch die weite Öffnung kann die Gurtschleife einfach eingehängt werden. Der Widerhaken verhindert ein unbeabsichtigtes Herausrutschen des Gurtes.

Die Birdie^{EVO}-Familie

Die mobile Patientenlifter-Serie.
(R)evolutionär weiterentwickelt.



Birdie^{EVO} COMPACT

▲ Die kompakte Variante ist schmaler und kürzer für beengte Räumlichkeiten



Birdie^{EVO}

▲ Die Standard-Variante des Invacare Birdie^{EVO} mit manueller Spreizung



Birdie^{EVO} Elektrisch

▲ Die Variante des Invacare Birdie^{EVO} mit elektrischer Spreizung



Birdie^{EVO} PLUS

▲ Maximale Ausstattung für höchste Ansprüche in der institutionellen Pflege




Birdie^{EVO} XPLUS

▲ Max. Ausstattung in verstärkter Ausführung für bariatrische Nutzer und höchste Ansprüche in der institutionellen Pflege

Ausstattung	Birdie ^{EVO} COMPACT	Birdie ^{EVO}	Birdie ^{EVO} (elektrisch)	Birdie ^{EVO} PLUS	Birdie ^{EVO} XPLUS
Max. Belastbarkeit	▶ 150 kg	▶ 180 kg	▶ 180 kg	▶ 180 kg	▶ 210 kg
Fahrgestellspreizung manuell	✓	✓	-	-	-
Fahrgestellspreizung elektrisch	-	-	✓	✓	✓
Abdeckung der Fahrgestellmotoren	-	-	-	✓	✓
Rollengröße hinten	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 125 mm	▶ 125 mm
Rollengröße vorne	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm
Innovationen					
Ergonomischer Spreizbügel	✓	✓	✓	✓	✓
Design-Haken zum einhändigen Einhängen	✓	✓	✓	✓	✓
SMARTLOCK® Schnellwechsel-System	-	-	-	✓	✓
Slow'R® Dämpfungs-System	-	-	-	✓	✓
Elektronik					
TiMotion® TC12AC (ab Seriennr. 23F) mit integriertem Netzteil und abnehmbarem Akku	✓	-	-	-	-
LINAK® CBJ-Home mit integriertem Netzteil und integriertem Akku	✓	✓	✓	-	-
LINAK® CBJ-Care mit integriertem Netzteil und abnehmbarem Akku	-	-	-	✓	✓
Handbedienteil mit Tasten für elektrische Verstellungen	✓	✓	✓	✓	✓
Handbedienteil zusätzlich mit Akku- und Serviceanzeige	-	-	-	✓	✓


Optionen und Zubehör

- ▶ 2-Punkt- und 4-Punkt-Spreizbügel in verschiedenen Breiten
- ▶ Große Auswahl an Patientengurten für die individuelle Versorgung:
 - 15 Modelle
 - 4 Stoffarten: Standard, Netz (zum Baden) und Premium (für besonderen Komfort), besonders flammgeschützt (als Ganztagesgurt)
 - 6 Größen durch farbigen Saum unterscheidbar
 - Max. Belastbarkeit bis 200 kg (XS - L), bis 250 kg (XL), bis 300 kg (XXL)
- ▶ Geeichte medizinische Waage RS300 ① und Homecare-Waage CR200 ② (nicht eichfähig) zum Einhängen zwischen Lifter und Spreizbügel

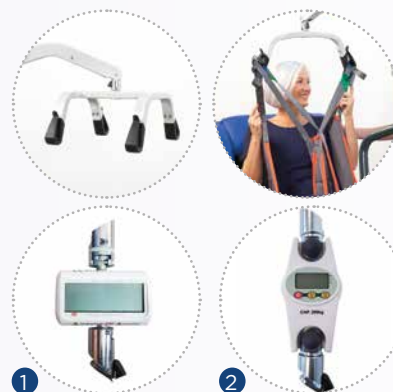

Technische Daten ▼

Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de

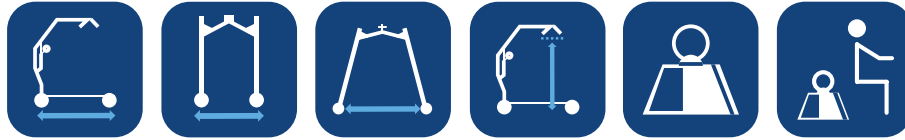

	Länge Fahrgestell ▼	Breite Fahrgestell ▼	Weite Fahrgestell-Spreizung ▼	Hebebereich ▼	Gewicht (ohne Spreizbügel) ▼	Max. Belastbarkeit ▼
Birdie EVO COMPACT	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg
Birdie EVO	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie EVO ELEKTRISCH	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie EVO PLUS	1280 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	180 kg
Birdie EVO XPLUS	1280 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	210 kg



	Höhe Fahrgestell ▼	Bodenfreiheit ▼	Höhe gefaltet ▼	Wendekreis ▼	Akkukapazität* ▼
Birdie EVO COMPACT	110 mm	35 mm	455 mm	1070 mm	40 Hebezyklen
Birdie EVO	110 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 Hebezyklen
Birdie EVO ELEKTRISCH	110 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 Hebezyklen
Birdie EVO PLUS	110 mm	35 mm	470 mm	1430 mm	40 Hebezyklen
Birdie EVO XPLUS	110 mm	35 mm	470 mm	1430 mm	40 Hebezyklen

Die Maßgaben beziehen sich auf 100 mm Rollen und 2-Punkt Spreizbügel. 75 mm Rollen reduzieren die Höhenangaben um 15 mm.

*Mit einer Akkuladung zwischen 100 % und 50 %

Produktfarben ▼



Lichtgrau:
Mast, Ausleger
und Spreizbügel
RAL: 7035



Anthrazitgrau:
Fahrgestell und
Handgriffe
RAL: 7016

Bitte beachten Sie: die Originalfarben können leicht von der Abbildung abweichen.

Zertifizierungen ▼



Den *Invacare Birdie EVO* sehen Sie im Video auf YouTube unter "Invacare Deutschland".



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 4881910
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

