

Action[®] Ampla[™]

Starker Style für bariatrische Nutzer



Prämiertes
Design!

Der super-funktionale Rollstuhl für einen
aktiven Lebensstil

INNOVATIV | AGIL | PREISGEKRÖNT



Für ein leichtes Leben

Action Ampla für bariatrische Nutzer

Endlich ein Rollstuhl, mit dem sich Personen mit Übergewicht rundum wohl fühlen können. Der Invacare Action Ampla wurde speziell für bariatrische Ansprüche entwickelt. Er lässt sich für unterschiedliche Aktivitätslevel einsetzen und fördert die Unabhängigkeit seiner Nutzer.

Der *Invacare Action Ampla* ist multifunktional: Hochkant aufgestellt lässt er sich auf vier kleinen Rollen leicht schieben und passt so durch jede Tür. Sein modernes, minimalistisches Design wurde mehrfach ausgezeichnet!



Mehrfach ausgezeichnet für sein starkes Design

Gutes Design heißt herausragendes Aussehen und eine besonders nutzerfreundliche Funktionalität. Die schlichte Reduziertheit und der moderne Schliff in Kombination mit den frischen Farbakzenten vermitteln bereits beim ersten Anblick des **Action Ampla** Freude. Dafür hat der Rollstuhl für bariatrische Nutzer gleich mehrere Preise gewonnen: Der Red Dot Design Award zählt zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Design. Auch dem hohen italienischen Designanspruch steht der **Action Ampla** in nichts nach: Er hat den italienischen Platinum A'Design Award geholt und Gold beim German Design Award.



reddot design award
winner 2019



5

HAUPT- MERKMALE



Tür zu schmal? Nicht mit der Action Ampla Passier-Hilfe!

1

Bahn frei auch bei Engstellen: Unsere Ingenieure haben eine geniale Funktion zum Passieren von schmalen Türen entwickelt.

1. Die Rückenlehne einklappen
2. Die Beinstützen anheben
3. Schon steht der **Action Ampla** auf seinen 4 frei beweglichen Transporträdern und lässt sich leicht schieben - ideal, um zum Beispiel schmale Türen zu passieren.

1.



2.



3.



Verschiedene aktive Hinterradpositionen

5

- ▶ Müheloser Antrieb
- ▶ Längere Distanzen mit weniger Anstrengung



2

Ergonomische Rückenlehne

- ▶ Viel Bewegungsfreiheit für die Arme
- ▶ Die Greifreifen sind frei erreichbar
- ▶ Besonders leichtes Antreiben
- ▶ Sehr wendig und gut manövrierbar



3

Höhenverstellbare Griffe

- ▶ Die stabilen Griffe sind ideal zum Abstützen beim Aufstehen und Hineinsetzen.
- ▶ Sie lassen sich abnehmen und nach innen und außen positionieren.



4

Persönlicher Style

- ▶ Schriftzug und Designelement in drei frischen Farben




Innovativ designte Rückenlehne



Das Design des *Invacare Action Ampla* eignet sich perfekt sowohl für übergewichtige männliche Rollstuhlnutzer, deren Körper eher der Form eines Apfels gleicht, als auch für übergewichtige weibliche Rollstuhlnutzer, deren Körper eher der Form einer Birne nachkommt.

Der Grund dafür besteht in der innovativen Rückenlehne, die so konzipiert wurde, dass die Anatomie beider Körperformen berücksichtigt wird. Der *Invacare Action Ampla* bietet jedem Nutzer die beste, ergonomische Unterstützung für den Rücken.

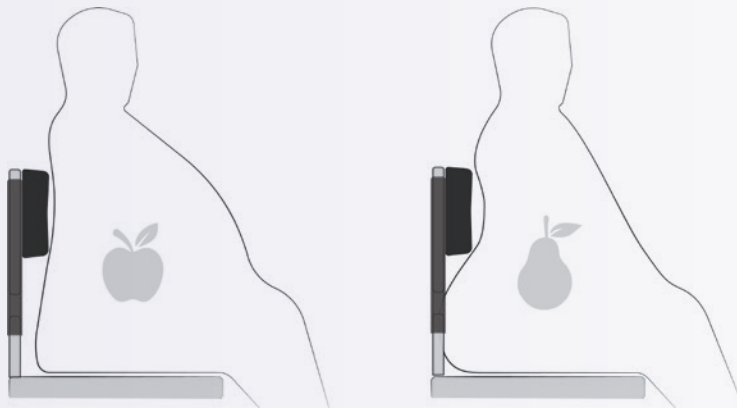

Haupteigenschaften

- ▶ Integrierte Passier-Hilfe
- ▶ Ergonomische Rückenlehne
- ▶ Höhenverstellbare Stützgriffe
- ▶ Persönliche Note für das Design
- ▶ Verschiedene Hinterradpositionen je nach Aktivitätsgrad einstellbar

Zusatzeigenschaften

- ▶ Ein atmungsaktiver, elastischer Sichtschutz verdeckt den Gesäßbereich.
- ▶ Die mit der PushLock-Funktion ausgestatteten Bremsen sind im Seitenschutz integriert und sehr gut zugänglich.

Technische Daten ▾

Detaillierte Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf www.invacare.de.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

						
Sitzbreite ▾	Sitztiefe ▾	Sitzwinkel ▾	Sitzhöhe ▾	Rückenwinkel ▾	Rückenlehnenhöhe ▾	
Action Ampla	505 / 555 / 605 / 655 / 705 / 755 mm	460 / 510 mm	1°	380 - 455 mm in 25 mm Schritten	0°	425 - 500 mm
						
Vorderrahmenwinkel ▾	Länge der Fußstützen ▾	Gesamtbreite ▾	Gesamtlänge inkl. Fußstützen ▾	Gesamtlänge ohne Fußstützen ▾	Gesamthöhe ▾	
Action Ampla	90 - 100°	365 - 525 mm in 25 mm Schritten	Sitzbreite + 205 mm	1065 - 1145 mm	855 - 920 mm	825 - 900 mm
						
Max. sichere Neigung ▾	Wenderadius ▾	Max. Benutzergewicht ▾	Gesamtgewicht ab ▾	Transportgewicht ab ▾		
Action Ampla	7°	1420 - 1660 mm	300 kg	27 kg	19.5 kg	

Rahmenfarben ▾



Kokos-Weiß

Delfin-Grau

Farbakzente ▾



Lagunen-Blau

Flamingo-Pink

Limonen-Grün

Bitte beachten Sie, dass die Originalfarben leicht von der Abbildung abweichen können.

Zertifizierungen ▾



Invacare GmbH
 Alemannenstraße 10
 88316 Isny / Deutschland
 Telefon +49 7562 700-0
 E-Mail kontakt@invacare.com
 Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
 Herzog-Odilo-Straße 101
 5310 Mondsee / Österreich
 Telefon +43 6232 553-50
 Fax +43 6232 553-54
 E-Mail info-austria@invacare.com
 Web www.invacare.at

Invacare AG
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil / Schweiz
 Telefon +41 61 48770-80
 Fax +41 61 48770-81
 E-Mail switzerland@invacare.com
 Web www.invacare.ch



Yes, you can.®