

AQUATEC®

Ocean Ergo Familie



Die konfigurierbaren und ergonomischen
Dusch- und Toilettenrollstühle

INVACARE
Yes, you can.®

Aquatec Ocean Ergo – die neue Serie der bewährten Dusch- und Toilettenrollstühle

Duschen und die tägliche Körperhygiene betreffen immer auch den Intimbereich des Patienten und erfordern einen würdevollen Umgang in der Pflege. Dabei spielen der Erhalt der Eigenständigkeit, das persönliche Sicherheitsgefühl und der Komfort eine große Rolle. *Aquatec Ocean Ergo* bezeichnet die neue Familie an Dusch- und Toilettenrollstühlen, die genau diese Attribute in sich vereinen.



Eine komplette Familie

Vom Standard-Modell bis hin zur Variante mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung: Das Aquatec Ocean Ergo-Sortiment an Dusch- und Toilettenrollstühlen bietet im Bereich der persönlichen Hygiene flexible Versorgungsungen für eine Vielzahl individueller Patientenbedürfnisse.



Ocean 24'' Ergo XL ▲

Das Standard-Modell als Selbstfahrversion für adipöse Nutzer – belastbar bis 180 kg

Ocean Ergo XL ▲

Das Standard-Modell als Schiebeversion für adipöse Nutzer – belastbar bis 180 kg

Ocean VIP Ergo ▲

Entwickelt für Nutzer, die Unterstützung bei der Körperhaltung im Sitzen benötigen – mit Sitzwinkelverstellung

Ocean Ergo ▲

Das Standard-Modell als Schiebeversion

Ocean Dual VIP Ergo ▲

Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne sind winkelverstellbar. Entwickelt für Nutzer mit komplexen Positionierungsbedürfnissen.

Ocean 24'' Ergo ▲

Das Standard-Modell als Selbstfahrversion

Auf unserem YouTube Invacare Deutschland Kanal finden Sie diverse Produktvideos zur **Ocean Ergo-Familie**



Geprüft nach
ISO 17966:2016

Nutzergerechtes Design zur Optimierung von Selbstständigkeit, Sicherheit und Flexibilität

Die persönliche Hygiene ist ein wichtiger Aspekt im Leben und trägt zum Wohlbefinden jedes Einzelnen bei. Beim Design der Dusch- und Toilettenrollstühle der Aquatec Ocean Ergo-Familie liegt der Fokus auf der Sitzergonomie (Komfort), der Wahrung der Selbstständigkeit und der Würde des Nutzers.

Selbstständigkeit

- neu konturierte Sitzfläche
- aufrechte und stabile Sitzposition

Flexibilität

- zusätzliche Stufe zur Höheneinstellung
- einfach anzubringendes, standardisiertes Zubehör

Sicherheit

- kleinere Aufstandsfläche, dadurch einfacheres Manövrieren in engen Räumlichkeiten
- verbesserte Überfahrbarkeit von Standard-Toiletten für die selbstständige Hygiene



1 Anpassbare Armlehnen

- ▶ Neu mit einem größeren Einstellbereich von 76 mm in 3 Stufen*

2 Anpassbare Sitzhöhe

- ▶ Einstellbereich von 125 mm in 6 Stufen

3 Anpassbare Fußstützen

- ▶ Neu mit einem größeren Einstellbereich von 150 mm in 7 Stufen, für noch größere bzw. noch kleinere Nutzer

4 Innovativer, ergonomischer Sitz

- ▶ Das neue Design unterstützt die aufrechte Sitzposition für eine verbesserte Selbstständigkeit und einen höheren Nutzerkomfort

5 Kompakt und wendig

- ▶ Optimiertes Chassis für ein einfaches Manövrieren in engen Räumlichkeiten


6 Extrem stabil

- ▶ Die verbesserte Stabilität nach vorne bietet zusätzliche Sicherheit

*Abweichende Angaben bei XL-Modellen

NEU Konturierte, ergonomische Sitzfläche

- ▶ Die neue Sitzfläche wurde anhand der gesamten Bandbreite von menschlichen Sitzabdrücken entwickelt.
- ▶ Der Sitzwinkel von 5° sorgt für eine Erhöhung der Knie und somit für eine natürliche, für den Toilettengang förderliche Position.
- ▶ Rutschhemmende Handballenauflagen an der vorderen Sitzkante ermöglichen dem Nutzer eine selbstständige Positionierung.

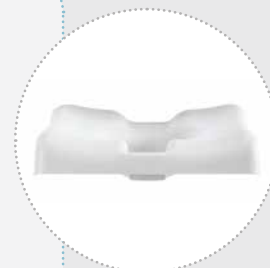

Hoch konfigurierbar


Für die Ocean Ergo-Familie ist ein breites Sortiment an Zubehör verfügbar. Diese decken Positionierung, Sicherheit, und Hygiene ab. Die Dusch- und Toilettenrollstühle lassen sich für eine Vielzahl individueller Bedürfnisse im Bereich Positionierung, Sicherheit und Hygiene einsetzen.



Positionierung



Sicherheit

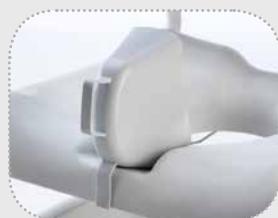

Hygiene



Sitzfläche und Rückenlehne

Zusätzliche Merkmale:

- ▶ Stabiler Edelstahl-Rahmen
- ▶ Maschinenwaschbarer, anpassbarer Rückenbezug mit schnellschließenden Gurtverschlüssen
- ▶ Einfache Demontage zu Transport- und Lagerungszwecken



Ocean Ergo mit 24"-Rädern



Ocean Ergo

Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar auf wirklich jeden Patienten

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼
480 mm



Sitztiefe ▼
480 mm



Gesamtbreite ▼
565 mm



Gesamthöhe ▼
1020 - 1145 mm



Belastbarkeit ▼
bis 150 kg



Gewicht ▼
17 kg



Ocean Ergo XL

Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar auch für adipöse Nutzer

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ 8 cm mehr Platz zwischen den Armlehnen durch XL-Rücken
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 180 kg



Sitzbreite ▼
480 mm



Sitztiefe ▼
480 mm



Gesamtbreite ▼
645 mm



Gesamthöhe ▼
1020 - 1145 mm



Belastbarkeit ▼
bis 180 kg



Gewicht ▼
18 kg





Ocean 24" Ergo

Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar für Selbstfahrer

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ mit 24" Rädern für Selbstfahrer
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼
480 mm



Sitztiefe ▼
480 mm



Gesamtbreite ▼
670 mm



Gesamthöhe ▼
1045 - 1170 mm



Belastbarkeit ▼
bis 150 kg



Gewicht ▼
23 kg



Ocean 24" Ergo XL

Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar für adipöse Selbstfahrer

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ 8 cm mehr Platz zwischen den Armlehnen durch XL-Rücken
- ▶ mit 24" Rädern für Selbstfahrer
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 180 kg



Sitzbreite ▼
480 mm



Sitztiefe ▼
480 mm



Gesamtbreite ▼
670 mm



Gesamthöhe ▼
1045 - 1170 mm



Belastbarkeit ▼
bis 180 kg



Gewicht ▼
24 kg



Modulare Versorgungs- für die persönliche Hygiene von Nutzern mit komplexen Positionierungsbedürfnissen

Sowohl **Ocean VIP Ergo** als auch **Ocean Dual VIP Ergo** verfügen über einen Sitzwinkelstellbereich von -5° bis 40°. **Ocean Dual VIP Ergo** besitzt zusätzlich einen Rückenwinkellstellbereich von 5° bis 35°, geeignet für Nutzer mit komplexen Positionierungsbedürfnissen.

-5° bis 40°

1 Einzigartige, ergonomische Sitzwinkelverstellung

- ▶ sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
- ▶ sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer

2 Innovativer ergonomischer Sitz

- ▶ Das neue Design unterstützt eine aufrechte Sitzposition für mehr Selbstständigkeit und einen höheren Nutzerkomfort



3 Kompakt und wendig

- ▶ Optimiertes Chassis für einfaches Manövrieren in engen Räumlichkeiten

4 Extrem stabil

- ▶ Verbesserte Stabilität nach vorne für zusätzliche Sicherheit

Weitere Merkmale



▲ Korrosionsfreier
Edelstahl-Rahmen



▲ Extrem stabil, auch bei
maximaler Rücken-
winkelverstellung



▲ Maschinenwaschbarer,
anpassbarer Rücken-
bezug



▲ Einfache Höhen-
verstellung der Fuß-
stützen und des Sitzes

Zusätzlich bei Ocean Dual VIP Ergo



▲ Rückenwinkelverstellung von 5° - 35°



▲ Glatter Rückenbezug
aus Kunstleder
zur Reduzierung
von Scher- und
Reibungskräften

NEU Ergonomische Sitzwinkelverstellung

- ▶ Dank des neuen Kantelemechanismus gleitet der Sitz nach unten und nach vorne. Der Schwerpunkt des Nutzers bleibt während der Bewegung nahezu unverändert. Dadurch lässt sich die Sitzwinkelverstellung für den Pfleger einfach und intuitiv betätigen und schafft ein angenehmes und sicheres Pflegerlebnis für den Patienten. Die Aufstandsfläche des Stuhls wurde insgesamt und insbesondere in der Länge reduziert. So ist der Stuhl noch wendiger bei gleichbleibender Stabilität.

Animationsvideo auf dem
"Invacare Deutschland"-
Kanal auf www.youtube.com



YouTube

Ocean VIP Ergo



Mit Sitzwinkelverstellung

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Innovative Sitzwinkelverstellung (-5° bis 40°):
 - sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
 - sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer
- ▶ ohne Gasdruckfeder
- ▶ Einstellmöglichkeiten für sehr kleine bis sehr große Nutzer:
 - Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
 - Fußstützenverstellung in 7 Stufen, werkzeuglos
 - Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼

480 mm



Sitztiefe ▼

480 mm



Gesamt-
breite ▼

565 mm



Gesamt-
höhe ▼

1052 - 1202 mm



Sitzwinkel-
verstellung ▼

-5° - 40°



Maximale Ge-
samtlänge bei
Sitzwinkelver-
stellung ▼

1520 mm



Belast-
barkeit ▼

bis 150 kg



Gewicht ▼

23,5 kg



▲ Ocean VIP Ergo mit Sitzwinkelverstellung

Ocean Dual VIP Ergo



Mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung

- ▶ Innovative Sitzwinkelverstellung (-5° bis 40°):
 - sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
 - sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer
- ▶ Neigungswinkel Rücken 5° bis 35°
- ▶ Einstellmöglichkeiten für sehr kleine bis sehr große Nutzer:
 - Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
 - Fußstützenverstellung in 7 Stufen, werkzeuglos
 - Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- ▶ Maschinenwaschbarer glatter Rückenbezug aus Kunstleder mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼



Sitztiefe ▼



Gesamtbreite ▼



Gesamthöhe ▼



Sitzwinkelverstellung ▼



Maximale Gesamtlänge bei Sitzwinkelverstellung ▼



Rückenwinkelverstellung ▼



Maximale Gesamtlänge bei Sitz- und Rückenwinkelverstellung ▼



Belastbarkeit ▼



Gewicht ▼

480 mm

480 mm

565 mm

1052 - 1202 mm

-5° - 40°

1520 mm

5° - 35°

1700 mm

bis 150 kg

28,3 kg



▲ Ocean Dual VIP Ergo mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung

Zubehör für die Ocean Ergo-Familie

Sitzfläche ▼



Standard Softsitz

Mit schlüsselförmigem Ausschnitt
AP1603142



Einsatz für Standard Softsitz

Zur Verwendung mit oder ohne Softsitz, sofern die Toilettenstuhlfunktion nicht benötigt wird
AP1603143



Softsitz mit kleiner Öffnung

Mit kleiner Öffnung für kleine oder junge Personen
AP1603145



Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung

Zur Verwendung mit Softsitz mit kleiner Öffnung, sofern die Toilettenstuhlfunktion nicht benötigt wird
AP1603152



Ergonomischer Softsitz

Extraweiche, konturierte Oberfläche für die Beckenstabilität
1531259



Variabler Softsitz

Der Ausschnitt kann in vier Richtungen positioniert werden (Schutzabdeckung (Paar) unbedingt mitbestellen.)
1544469



Schutzabdeckung

Schutzabdeckung (Paar) zur Verwendung mit Variablem Softsitz
AP1605002



Universalsoftsitz

Bequeme, geschlossene Sitzoberfläche
AP1603154

Rückenlehne ▼



Feste Rückenlehne

Ermöglicht eine stabile, aufrechte Haltung; aus Kunststoff gefertigt und besonders einfach zu reinigen; nicht kompatibel mit XL-Rücken
1575299



Weiches Rückenkissen

Zusätzliche Stabilität und Positionierung; geeignet auch für kleine Personen
1558769



Glatter Rückenbezug

Für zusätzlichen Komfort - einfach zu reinigen und schnelltrocknend dank glatter Oberfläche aus Kunstleder
AP1604136 für **Ocean Ergo** und **Ocean 24" Ergo**
AP1604016 für **Ocean Ergo XL** und **Ocean 24" Ergo XL**
AP1603606 für **Ocean VIP Ergo** und **Ocean Dual VIP Ergo**

Positionierung ▼




Seitenpelotte

Zur sicheren Positionierung des Nutzers; einstellbar in Breite und Höhe, geeignet auch für kleine Personen
1535077




Ergonomische Kopfstützenhalterung

Sicherheit und Komfort durch vielfältige Positionierungsmöglichkeiten (Polster nicht im Lieferumfang enthalten)
1531613

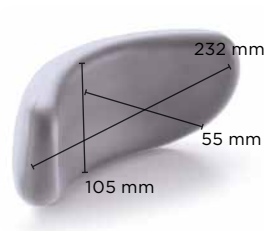

Ergonomisches Kopfstützenpolster

Hervorragende Unterstützung der Kopfposition
1531465

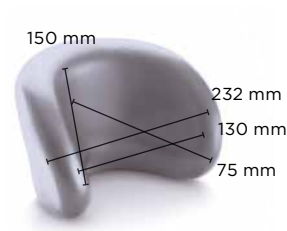

Ergonomisches Nackenstützenpolster

Hervorragende Unterstützung der Nackenposition
1531608

Sicherheit ▼



Beinstützenoberteil mit Fußstütze

Gepolstert, hochschwenkbar, mit Fußstütze (komplett)
AP1643572 links
AP1643543 rechts



Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze

Gepolstert, höhen- und winkelverstellbar
AP1643574 links
AP1643573 rechts



Sicherheitsbügel

Für zusätzliche Sicherheit; die Grifffläche ist angenehm gepolstert; Montage ohne Werkzeug
10167-10 für **Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**
XL-Variante (80 mm breiter):
1470078 für **Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL**



Brust- / Beckengurt

Für zusätzlichen Halt; individuell einstellbar, belastbar und pflegeleicht; schnelle Montage; waschmaschinengeeignet
Länge: 620 - 1210 mm.
1470081 - Brustgurt
1470082 - Beckengurt



Armlenkenarretierung (Paar)

Zum Feststellen der Armlenken in der niedrigen oder hohen Position.
1470077



Vordere Kippstütze (Paar)

Für zusätzliche Sicherheit
AP1601986 (vorne montierbar) für **Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL**



Vordere bzw. hintere Kippstütze (Paar)

Für zusätzliche Sicherheit
AP1603992 (vorne oder hinten montierbar) für **Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**



Rolle mit Richtungsfeststeller

Für leichteren Geradeauslauf
SP1607741

Hygiene ▼



Spritzschutz

Einfache Klemmbefestigung aus Kunststoff; zur Verwendung geeignet mit dem Sitz aus Kunststoff, dem Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt
AP1603155



Toilettentopf

Ergonomischer Griff zur einfachen Entnahme des Topfes aus dem Halter passend für Standardaufhängung in Steckbeckenspülern; Kunststoffhaken zum Aufhängen des Deckels, wenn dieser nicht benötigt wird
10230



Toilettentopfhalter

Zum Einhängen des Toilettentopfes
AP1602078

Selbstständigkeit ▼



24"-Räder (Set)

Antriebsräder zur Nachrüstung als Selbstfahrerversion; inklusive Bremsen und Steckachsen
16379

Umrüstung ▼



XL-Rücken

Extrabreiter Rücken; verbreitert den Abstand zwischen den Armlehnen um 80 mm; zur Nachrüstung von Standard **Ocean Ergo**-Modellen geeignet
AP1604015



XL-Armlehnen (Paar)

Verbreitert den Abstand zwischen den Armlehnen um 80 mm
1470086



Rückenlehnenrohr des Ocean VIP Ergo

Zum Nachrüsten für **Ocean Ergo** oder **Ocean 24" Ergo** für die Verwendung von einer Kopf- oder Nackenstütze (Kopfstütze, Armlehnen und Rückenbezug nicht enthalten)
AP1606985

Kompatibilität der Zubehörteile

Fast alle Zubehörteile sind kompatibel zwischen den Ocean Ergo-Modellen.

Kategorie	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ocean Ergo-Modelle		Ocean Ergo XL-Modelle		Ocean VIP Ergo-Modelle	
			Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sitzfläche	Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	API 603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	API 603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Softsitz mit kleiner Öffnung	API 603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung	API 603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomischer Softsitz	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Variabler Softsitz	1544469	✓	✓	✓	✓	✓ mit API 605002 ^a	✓ mit API 605002 ^a
	Universalssoftsitz	API 603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	Feste Rückenlehne (Kunststoff)	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Glatter Rückenlehenbezug (Kunstleder)	modell-abhängig	✓ API 604136		✓ API 604016		✓ API 603606	◆ API 603606
	Weiches Rückenkissen	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positionierung	Seitenpelotte (1 Stück), passend für rechts und links	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, rechts	API 643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, links	API 643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, rechts	API 643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, links	API 643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomische Kopfstützenhalterung + Klemmhalter	1531613+1470971	✓ mit API 606985 ^b	✓ mit API 606985 ^b	✗	✗	✓	✓
	Kopfstützenpolster	1531465	✓ mit API 606985 ^b	✓ mit API 606985 ^b	✗	✗	✓	✓
Nackenstützenpolster	1531608	✓ mit API 606985 ^b	✓ mit API 606985 ^b	✗	✗	✓	✓	
Sicherheit	Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel XL	modell-abhängig	✓ 10167-10		✓ 1470078		✓ 10167-10	
	Brustgurt	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beckengurt	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armlehnenarretierung (Paar)	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kippstütze	modell-abhängig	✓ API 601986 (vorne)		✓ API 601986 (vorne)		✓ API 603992 (vorne bzw. hinten)	
Hygiene	Spritzschutz	API 603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopf (mit Handgriff und Deckel)	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopfhalter	API 602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstständigkeit	24"-Räder (Set) inkl. Bremsen und Steckachse	16379	✓	◆	✓	◆	✗	✗
Umrüstung	XL-Rücken	API 604015	✓	✓	◆	◆	✗	✗
	Verbreiterte XL-Armlehnen (Paar), Nachrüstsatz	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Ocean VIP Ergo Rückenlehenrohr, Umrüstsatz*	API 606985	✓	✓	✗	✗	◆	◆

^a Schutzabdeckung (Paar) für variablen Softsitz (unbedingt mitbestellen unter API 605002)

^b Kopfstützen nur in Verbindung mit Rückenlehen-Rohrrahmen des Ocean VIP Ergo möglich, Artikel API 606985 unbedingt mitbestellen

* Standard-Kopfstütze komplett, bestellbar unter Artikel 1470970 (Kopfstütze, Polster, Klemmhalter, Distanzstück)

- ◆ = bereits enthalten
- ✓ = kompatibel
- ✗ = nicht kompatibel
- = rückwärtskompatibel mit den jeweiligen Vorgängermodellen der Ocean-Familie



Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

